

FFP2

Mascarilla filtrante

Mascarilla de protección 94% filtración para la contaminación de partículas



Información técnica

Nombre de producto: Mascarilla de filtración

Clasificación: FFP2

Modelo: MSH

Tamaño: 15,7 x 10,7 cm


Estándar: EN 149:2001 + A1:2009

Composición: 66,7% Tela no tejida, 33,3% tela fundida por soplado

Aviso de alergia: Textil no tejido

Caducidad: Dos años bajo las condiciones de almacenamiento especificadas

SKU: MASK ST-00013.0050

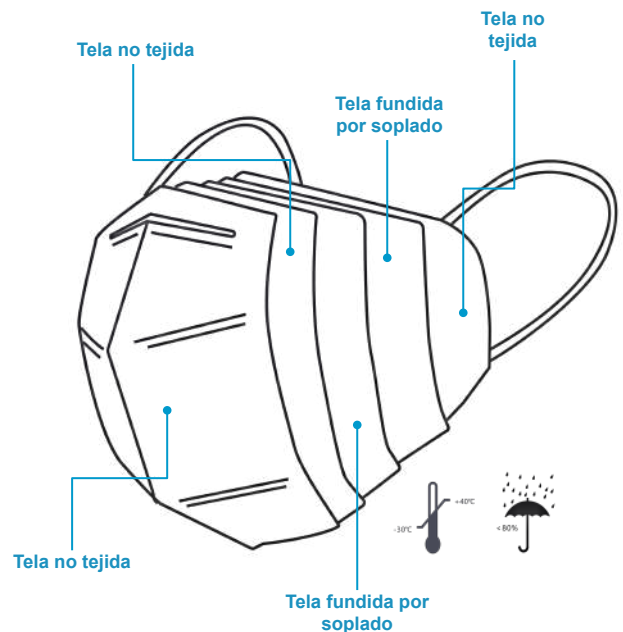

Instrucciones para ponerse la mascarilla

1. Sujétela con una mano, con el clip nasal orientado hacia los dedos y las cintas de sujeción colgando.
2. Coloque la mascarilla sobre la cara cubriendo totalmente la nariz y la boca. El clip nasal debe quedar sobre la nariz.
3. Sujete la mascarilla con una mano sobre la barbilla. Tire de la cinta y colóquela detrás de la oreja.
4. Ajuste el clip nasal a la nariz con ambas manos y asegúrese de que los bordes de la mascarilla están en contacto directo con la cara.
5. Haga una prueba de ajuste-fuga para comprobar que se ha puesto la mascarilla de forma correcta. Cubra la mascarilla con las dos manos y exhale con fuerza. Si detecta fugas a través de los bordes, modifique la posición de la mascarilla sobre la cara, reajuste el clip nasal o ajuste la tensión de las cintas de sujeción. Repita este proceso hasta que no detecte ninguna fuga.



CE 2163

EN 149:2001 + A1:2009

FFP2

Mascarilla filtrante

Mascarilla de protección 94% filtración para la contaminación de partículas



Información importante

- Los equipos NR no deben usarse en más de un turno de trabajo.
- Usar bajo las recomendaciones del fabricante, siguiendo las instrucciones del etiquetado.
- Estas mascarillas no aportan oxígeno.
- No usar en atmósferas con baja concentración de oxígeno o zonas poco ventiladas.
- La presencia de características faciales especiales, vello abundante o gafas puede impedir un correcto ajuste de la mascarilla.
- Mantener alejadas de fuentes de calor.
- Guardar en un espacio interior bien ventilado, con humedad inferior al 80% y sin gases corrosivos.

Características del paquete

Cantidad: 50 uds(bolsas individuales)/paquete

SKU: MASK-ST-00013.0050

Dimensión: 151,5 x 195 x 131,2 mm

Características de la bolsa individual

Cantidad: 1 ud/bolsa

SKU: MASK-ST-00013.0001

Dimensión: 185 x 130 mm



Características de la caja

Cantidad: 50 uds/paquete, 12 paquetes/caja

Total cantidad: 600 unidades

Dimensión: 551 x 480 x 220 mm

CE 2163

EN 149:2001 + A1:2009